

## LED lampe Rollator. TOPRO Rollatorer

### LED lamp Rollator. TOPRO Rollators

### Led Lampe Rollator. TOPRO Rollators


Ryggbøyle  
Back support  
Rückengürt.

Troja Classic



Troja 2G.

Olympos

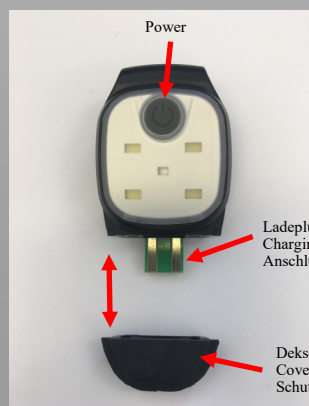

**Innhold:** 1 x 104277 LED lampe Rollator  
1 x 815260M1 Monteringsanvisning

**Content:** 1 x 104277 LED Lamp Rollator  
1 x 815260M1 Mounting instructions

**Inhalt:** 1 x 104277 LED Lampe Rollator  
1 x 815260M1 Montageanweisung

Montering

Mounting

Montage

## English

"The LED lamp is equipped with an integrated rechargeable battery and can be recharged through the USB port of your computer. Since this product uses a rechargeable lithium-ion polymer battery, it must be recharged at least once of three months in order to prolong the life of the battery and protect the battery from dam-

**Use:** Press the power button to switch between the three light levels, red flash and off. 1st push: High level. 2nd push: Medium level. 3rd push: Low level. 4th push: Red flash. 5th push: Off

**Charging:** Remove the protective cover of the USB connector. Choose your preferred USB charger. Charging time: approx. 1 hour, depending on the charger. Red light when charging, green light when fully charged. **Please note:** If the charge light is not on, turn the USB connector.

**Warning:** The LED light is not a toy. Only to be used as intended.

**LED lampe rollator.  
TOPRO Rollatorer**
*LED lamp Rollator.  
TOPRO Rollators*
**Led Lampe Rollator.  
TOPRO Rollators**


## Norsk

Led lampen er utstyrt med et integrert ladbart batteri og kan lades med USB porten på din PC. Siden dette produktet har et ladbart litium-Ion polymer batteri, må det lades en gang hver 3 måned for å opprettholde batterilevetiden maksimalt.

**Bruk:** Press power knappen for å variere mellom de 3 forskjellige lys innstillingene, røde blink og av.

Trykk 1 : Maks lysstyrke. Trykk 2: Medium lysstyrke. Trykk 3: lav lysstyrke. Trykk 4: Rødt blink. Trykk 5: Av.

**Lading :** Fjern beskyttelsesdekslet på USB kontakten. Velg type USB lader. Ladetid : ca 1 time, avhengig av type lader. Rødt lys når lading pågår, grønt lys når den er fullt oppladet. NB! Hvis ladelyset ikke lyser, snu USB kontakten 180grader.

**Advarsel :** Led lyset er ikke et leketøy. Skal bare benyttes som beskrevet.

## Deutsch

Die LED-Lampe ist mit einem integrierten Akku ausgestattet und kann über den USB-Anschluss Ihres Computers aufgeladen werden. Da dieses Produkt eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Polymer-Batterie verwendet, muss es mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer zu verlängern.

Drücken Sie die Power-Taste, um zwischen den verschiedenen Stadien zu wechseln: Lichtstufe 1, 2 und 3, rot blinkend und aus. 1. Drücken: hohes Niveau. 2. Drücken: mittlere Ebene. 3. Drücken: Low-Level. 4. Drücken: roter Blitz 5. Drücken: aus

Entfernen Sie die Schutzabdeckung des USB-Anschlusses. Wählen Sie Ihr bevorzugtes USB-Ladegerät. Ladezeit: ca. 1 Stunde, abhängig vom Ladegerät. Rotes Licht beim Laden, grünes Licht bei voller Ladung. Bitte beachten Sie: Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, drehen Sie den USB-Anschluss

**Warnung:** Das LED-Licht ist kein Spielzeug. Nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.