

PIXEL

Indoor



Dänisches Design

Der kleine Luxus

Eine gute Wahl

Der PIXEL ist ein mehrfach-funktionaler und durchaus praktischer Leichtgewicht-Rollator für die Verwendung in Innenräumen. Sehr geeignet für Personen, die gerne unabhängig sein möchten, aber ein wenig Hilfe zu Hause brauchen. Der PIXEL ist einzigartig und kombiniert ein modernes Design mit einem Gesamtgewicht von nur 5,2 kg.

www.rehasense.com / Email: info@rehasense.com / +49 2821 590 8587




REHASENSE



Formschönes, einzigartiges und modernes Design. Der Rahmen ist aus Aluminium gefertigt worden.



Mit einem Gesamtgewicht von 5,2 kg inklusive Tablett und Tasche, ist der PIXEL einer der leichtesten Indoor-Rollatoren auf dem Markt.

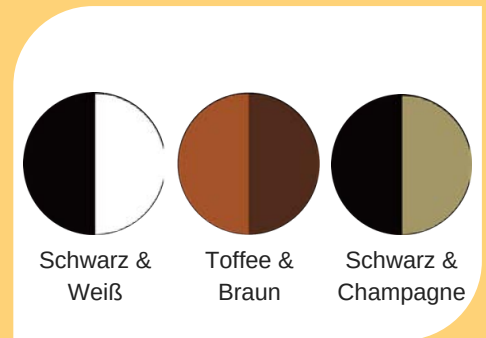

Der PIXEL ist in 3 Farbkombinationen erhältlich: im klassischen schwarz & weiß, im natürlichen toffee & braun und im feinen schwarz & champagner.



Der PIXEL ist serienmäßig mit einer praktischen Netztasche ausgestattet für persönliche Sachen wie z.B. Handy, Fernbedienung, Medizin, Brille, usw.



Serienmäßig ein Tablett in der Farbe "smoke brown", in praktischer Größe und Form; kann im Geschirrspüler gewaschen werden.



Der PIXEL ist standardmäßig mit abnehmbarer und waschbarer Stofftasche für größere Sachen ausgestattet.



Die Einhandbedienung mit durchgehendem Bremsbügel funktioniert einwandfrei, ist einfach und benutzerfreundlich.



Der Schiebegriff lässt sich leicht verstellen (5-fach) bis auf eine gewünschte Höhe (von 86 bis 97 cm) – Markierung: 1 – 5, mit 1 Hand bedienbar.



Der Handgriff ist weich und komfortabel zum Anfassen.



Der PIXEL ist mit einem einzigartigen Verriegelungssystem ausgestattet, das einfaches Auseinander- und Zusammenfallen des Rollators erlaubt.




Die Räder haben schwarze Softbereifung aus PU, die für optimales Komfort und Griff auf glatten Böden sorgen.




Eleganz und Design verbunden mit sehr geringem Gewicht und super weichen Rädern sorgen für problemlose Bewältigung von Türschwellen usw.



PIXEL

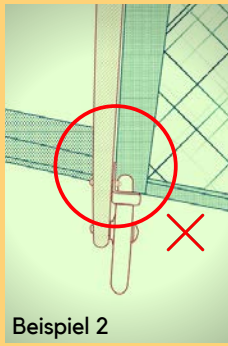

Beispiel 2

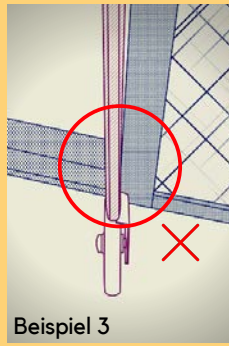

Beispiel 3

Die im Rahmen integrierte Radgabel, die mit dem Hinterrad verbunden ist, verhindert das Feststecken beim Überfahren durch Türen und Durchgänge, zwischen Möbeln usw. sowie auch das Zerkratzen von Möbeln.



Die Bauweise vom Rahmen erlaubt den PIXEL an den Stuhl, das Bett oder die Couch heranzuschieben und als ein Beistelltisch zu nutzen.




Durch seine schmale Bauweise von nur 54 cm und die schwenkbaren Vorderräder ist er überall einsetzbar, auch bei geringem Platzangebot (z.B. sehr schmale Toiletten- oder Küchentüren in alten Wohnungen).

PIXEL mit Tablett kann als Servierwagen benutzt werden, kann aber auch als Tisch dienen.

Falten in 3 Schritten



Schritt 1: Drücken Sie die rote Sperrtaste und drehen Sie den Korbrahmen nach oben in die Senkrechte Position.

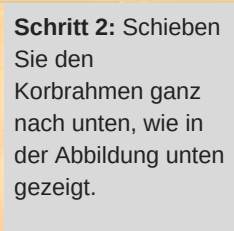

Schritt 2: Schieben Sie den Korbrahmen ganz nach unten, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Schritt 3: Falten Sie den Rahmen, indem Sie den Korb ziehen, bis Sie einen leichten Klick hören.



Bequeme, platzsparende Aufbewahrung - Pixel ist sehr einfach zu falten, zu entfalten und zu lagern. Falten und Entfalten erfolgt in 3 Schritten. Steht auf den Rädern, wenn zusammengeklappt. Bleibt in gefalteter Position verriegelt.

Um den Rollator zu entfalten, ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.





Schwarz & weiß



Toffee & braun



Schwarz & champagner

Technische Daten

Farben	Artikelnummer	Gesamtgewicht (Inklusive Tablett und Tasche)	Max. Belastung	Gesamthöhe (5-fach verstellbar in die Höhe)	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Faltmass (H x B x L)	Tablett Abmessungen	Tablett Höhe	Tasche max. Zuladung
Schwarz & weiß	PRWBL700	5,2 kg	110 kg	86-97 cm	64 cm	54 cm	91x54x27 cm	43 x 33 cm	71 cm	5 Kg
Toffee & braun	PRBRL700	5,2 kg	110 kg	86-97 cm	64 cm	54 cm	91x54x27 cm	43 x 33 cm	71 cm	5 Kg
Schwarz & champagner	PRCBL700	5,2 kg	110 kg	86-97 cm	64 cm	54 cm	91x54x27 cm	43 x 33 cm	71 cm	5 Kg

*Der PIXEL wird in einer Kartonverpackung verschickt und kann sofort benutzt werden.

*Verwendung: Im Hause.



Stockhalter - Artikelnummer: ACR01012P

Pixel Zubehör



Praktische Netztasche mit Reißverschluß zur Aufbewahrung von persönlichen Sachen wie Handy, Brille, Schlüssel, Medizin usw.
Artikelnummer: ACR01032



Antirutschmatte für Tablett, schwarz.
Artikelnummer: ACR01037

Fachhändler



Garantie: 2 Jahre



PIXEL wurde nach ISO 11199-2:2005 geprüft

Ver. 1 - 09/2017